




## INSTRUCCIONES DE USO DEL SISTEMA GENUAIR® Y NOVOLIZER®


### ¿Cómo debo usar mi Genuair®?

- 1** Retirar la tapa protectora, estirando hacia afuera.



- 2** Sostenga el inhalador con el botón verde hacia arriba. **NO LO INCLINE.**

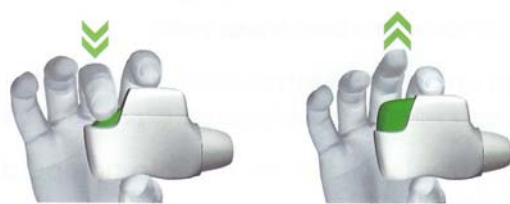

- 3** Pulsar y soltar el botón verde.


- 4** Compruebe que la ventana de control con indicador de color ha cambiado a verde. Si la ventana de control continua de color rojo, repita la acción de pulsar y soltar.




Inhalador preparado para su uso
- 5** Suelte todo el aire.


- 6** Con los labios apretados alrededor de la boquilla, inspire con fuerza y profundamente a través de la boquilla. Mientras inspira oirá un "CLIC" que indica que lo está utilizando correctamente.



ATENCIÓN: No mantenga pulsado el botón verde mientras inhala.
- 7** Retire el inhalador de la boca y contenga la respiración mientras se sienta cómodo. Expulse el aire lentamente por la nariz. Si la inhalación ha sido correcta la ventana habrá cambiado a color rojo.



Inhalación realizada correctamente
- 8** Si la ventana de control sigue de color verde, vuelva a inhalar con fuerza.
- 9** Tapar el dispositivo

